




## СИТОВОЙ АНАЛИЗАТОР OCTAGON 200

**Ситовой анализатор Octagon 200 подходит для всех задач отсева и обеспечивает быстрые и воспроизводимые результаты.** Он прочный, компактный и достаточно легкий, чтобы его можно было переносить. Электромагнитный привод в сочетании с трехмерным просеивающим движением обеспечивает отличную эффективность разделения за короткое время. Цифровой дисплей, а также быстросъемная зажимная система делают задачу отсева легкой и простой.

## ПРЕИМУЩЕСТВА ОБОРУДОВАНИЯ

- | Простая в использовании система зажима сит
- | Вмещает до 8 сит полной высоты диаметром 200 мм (8 дюймов)
- | Подходит для сухого и мокрого отсева
- | 10 настроек амплитуды и цифровой таймер
- | Трехмерное просеивающее движение обеспечивает высокую эффективность разделения материала и обеспечивает просеивание без блокировки ячеек сита
- | Доступны версии для разных сетей электропитания
- | Нет механических движущихся частей
- | Компактный и портативный
- | Легко настраивается на максимальную эффективность
- | Соответствует требованиям AASHTO T 27

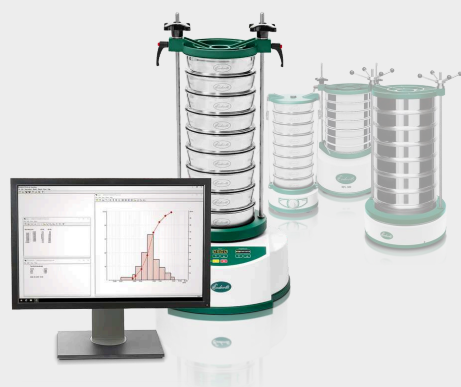

## ИДЕАЛЬНОЕ ДОПОЛНЕНИЕ К НАШИМ СИТОВЫМ АНАЛИЗАТОРАМ: SIEVEWARE

Для лучших результатов оценки и более эффективного использования.

- | Автоматическая регистрация, оценка и администрирование данных измерений.
- | Автоматическое определение и настройка общих аналитических весов
- | Комплексный экспорт данных

### СИТОВОЙ АНАЛИЗАТОР OCTAGON 200

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон	20 мкм - 125 мм
Привод / просеивающее движение	электромагнитный, трёхмерное
Максимальное количество материала	3 кг
Максимальное количество сит	8 полной высоты / 16 половинной высоты (200 мм / 8" сита)
Задание амплитуды	0 - 3 мм* 10-шаговая, цифровая
Задание скорости	3,000 об/мин при 50 Гц
Дисплей времени	цифровая, 00:10-99:50 мин
Работа с интервалами	да (1 режим)
Возможность сухого отсева	да
Возможность мокрого отсева	да
Серийный интерфейс	нет
Диаметр сит	100/200 мм 8"
Макс. высота колонны сит	до 450 мм
Зажимное устройство	быстросъемное зажимное устройство (в комплекте)
Модель	настольная модель
Степень защиты	IP 21
Электропитание	доступны версии для различных сетей электропитания
Тип электросети	1 - фазное
Ш x В x Д	418 x 232 x 435 мм
Вес нетто	~35 кг
Стандарты	CE

\* макс. амплитуда в зависимости от нагрузки

[www.endecotts.ru/octagon200](http://www.endecotts.ru/octagon200)

## ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

### ПРОСЕИВАЮЩАЯ МАШИНА OCTAGON 200

**для 8 сит полной высоты диаметром 200 мм (8") (заказываются отдельно), - SR-включая быстросъемную зажимную систему**

OCT200/23050	Octagon 200, 230 В, 50 Гц
--------------	---------------------------

OCT200/23060	Octagon 200, 230 В, 60 Гц
--------------	---------------------------

OCT200/10050	Octagon 200, 100 В, 50 Гц
--------------	---------------------------

OCT200/10060	Octagon 200, 100 В, 60 Гц
--------------	---------------------------

OCT200/11050	Octagon 200, 110 В, 50 Гц
--------------	---------------------------

OCT200/11060	Octagon 200, 110 В, 60 Гц
--------------	---------------------------

**Сита и аксессуары (приемный сосуд, крышка и др.)**

### НАБОР ДЛЯ МОКРОГО РАССЕВА

ZMWSK-OCT200	ø 200 мм	for Octagon 200 and Octagon 200 CL
--------------	----------	------------------------------------

ZMWSK-OCT200_8	ø 8"	for Octagon 200 and Octagon 200 CL
----------------	------	------------------------------------