



TAMISEUSE OCTAGON 200CL


La nouvelle Octagon 200CL pour des processus de tamisage précis, reproductibles et sans erreur est en concurrence avec les tamiseuses les plus avancées au monde.

Plusieurs caractéristiques uniques ont été développées spécifiquement pour cette tamiseuse, notamment le contrôle d'amplitude en "boucle fermée" pour une reproductibilité optimale.

L'Octagon 200CL est conçue pour fonctionner avec SieveWare d'Endecotts, le nouveau logiciel qui permet d'évaluer et de documenter facilement le processus de tamisage.

AVANTAGES PRODUIT

- | Le contrôle de l'amplitude totale en boucle fermée assure un tamisage reproductible
- | Commandes numériques pour un fonctionnement simple et fiable
- | Système de fixation des tamis facile à utiliser
- | Accepte jusqu'à 8 tamis pleine hauteur de 200 mm (8") de diamètre
- | pour le tamisage sec et humide
- | Le mouvement de tamisage 3D permet une grande efficacité de séparation et une action de tamisage non obturante.
- | Compatibilité totale avec le nouveau logiciel d'évaluation et de contrôle SieveWare via le port RS232 (protocoles imprimés ou numériques)
- | Indépendant de la tension
- | Aucune pièce mécanique mobile
- | Compact & portable
- | Facilement réglé pour une efficacité maximale
- | Respecte les exigences de AASHTO T 27

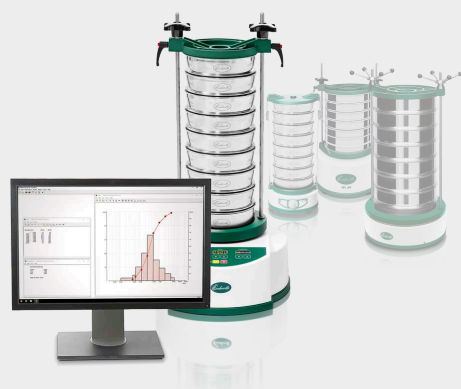

LE COMPLÉMENT PARFAIT DE NOS TAMISEUSES : SIEVEWARE

Pour des résultats d'évaluation encore meilleurs et un traitement efficace.

- | Enregistrement, évaluation et gestion automatiques des données de mesure
- | Détection automatique et configuration des échelles analytiques communes
- | Exportation de données complètes

TAMISEUSE OCTAGON 200CL

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Gamme	20 µm to 125 mm
Moteur / mouvement de tamisage	électromagnétique 3D
Charge / quantité max. de matière à tamiser	3 kg
Nombre max de tamis	8 de hauteur totale / 16 de demi-hauteur (tamis de 200 mm/8" de diamètre)
Amplitude	0 - 3 mm réglage numérique par paliers de 0,1 mm Contrôle d'amplitude "Closed Loop"
Vitesse de rotation	3000 min-1 à 50 Hz
Affichage du temps	numérique, 00:10 - 99:50 min
Mode de fonctionnement intermittent	oui (2 modes)
Convient pour le tamisage à sec	oui
Convient pour le tamisage en milieu humide	oui
Port série	oui (RS-232)
Diamètre du tamis	100 / 200 mm 8"
Hauteur max. de la colonne de tamis	jusqu'à 450 mm
Système de serrage	système de fixation rapide (inclus)
Modèle	de pailleasse

Indice de protection	IP 21
Alimentation électrique	100-240V 50/60Hz
Connexion d'alimentation	1 - Phase
L x H x P	418 x 232 x 435 mm
Poids net	~35 kg
Normes	CE

www.endecotts.fr/octagon200cl

N° ARTICLE

TAMISEUSE OCTAGON 200CL

**pour 8 tamis pleine hauteur de 200 mm de diamètre (à commander séparément),
inclus le système de fixation rapide**

OCT200CL/100-240

Octagon 200CL, 100-240 V, 50/60 Hz

Tamis et accessoires (collecteur, couvercle, etc.)

KIT DE TAMISAGE HUMIDE

ZMWSK-OCT200	ø 200 mm	for Octagon 200 and Octagon 200 CL
ZMWSK-OCT200_8	ø 8"	for Octagon 200 and Octagon 200 CL