



СИТОВОЙ АНАЛИЗАТОР TITAN 450


Название говорит само за себя: новый Titan 450 - самый мощный ситовой анализатор от Endecotts! Он разработан для сит большого диаметра и может работать с контрольными ситами диаметром до 450 мм!

Endecotts Titan 450 используется для проведения ситовых испытаний с колоннами сит для определения размера частиц в различных образцах материалов. Ситовой анализатор оснащен электромагнитным приводом со специальными пружинами из углеродного волокна, которые установлены под рассчитанным углом для обеспечения горизонтального скручивания, а также вертикального движения для проведения эффективных испытаний сит.

Titan 450 оснащен пультом дистанционного управления с цифровым контроллером для установки амплитуды вибрации, времени обработки и периодических настроек.

ПРЕИМУЩЕСТВА ОБОРУДОВАНИЯ

- | Электромагнитный привод для тихой и практически не требующей обслуживания работы
- | Легко настраивается на максимальную эффективность
- | Цифровое управление для простой и надежной работы через внешний интерфейс
- | Экономичное решение
- | Нет механических движущихся частей
- | Подходит для мокрого и сухого рассева

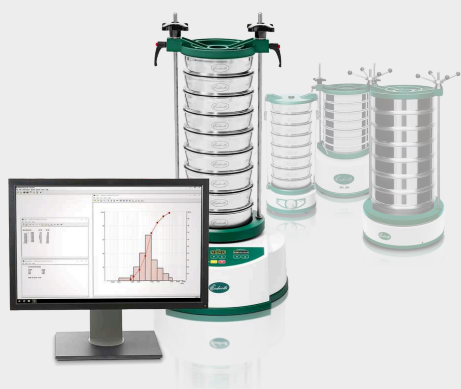

ИДЕАЛЬНОЕ ДОПОЛНЕНИЕ К НАШИМ СИТОВЫМ АНАЛИЗАТОРАМ: SIEVEWARE

Для лучших результатов оценки и более эффективного использования.

- | Автоматическая регистрация, оценка и администрирование данных измерений.
- | Автоматическое определение и настройка общих аналитических весов
- | Комплексный экспорт данных

СИТОВОЙ АНАЛИЗАТОР ТИТАН 450

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон	20 мкм - 125 мм
Привод / просеивающее движение	электромагнитный, трёхмерное
Максимальное количество материала	20 кг
Максимальное количество сит	7 полной высоты, 450 мм / 11 полной высоты, 300 мм
Задание амплитуды	0 - 2 мм 10-шаговая, цифровая
Задание скорости	3,000 об/мин при 50 Гц
Дисплей времени	цифровая, 00:10 - 99:50 мин (внешний блок)
Возможность сухого отсева	да
Возможность мокрого отсева	да
Диаметр сит	250 / 300 / 315 / 350 / 400 / 450 mm / 8" / 12"
Макс. высота колонны сит	до 830 мм
Зажимные устройства	поворотная зажимная система (в комплекте)
Модель	напольная модель
Степень защиты	IP 54
Электропитание	доступны версии для различных сетей электропитания
Тип электросети	1- фазное
Ш x В x Д	606 x 230 мм
Вес нетто	~ 140 кг
Стандарты	CE

www.endecotts.ru/titan450

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

ПРОСЕИВАЮЩАЯ МАШИНА TITAN 450

**для до 7 сит диаметром 450 мм (18") (заказываются отдельно)
включая поворотную зажимную систему**

T450/23050	Titan 450, 230 В, 50 Гц
T450/23060	Titan 450, 230 В, 60 Гц
T450/10050	Titan 450, 100 В, 50 Гц
T450/10060	Titan 450, 100 В, 60 Гц
T450/11050	Titan 450, 110/120 В, 50 Гц
T450/11060	Titan 450, 110/120 В, 60 Гц

Сита и аксессуары (приемный сосуд, крышка и др.)

НАБОР ДЛЯ МОКРОГО РАССЕВА

ZMWSK-T450 ø 450 мм для Titan 450