



СИТОВОЙ АНАЛИЗАТОР ОСТАГОН 200CL


Новый ситовой анализатор Octagon 200CL для точного, воспроизводимого и безошибочного отсева. Конкурирует с самыми совершенными ситовыми анализаторами в мире.

Специально для этого ситового анализатора было разработано несколько уникальных функций, в том числе контроль амплитуды "замкнутого контура" для максимальной воспроизводимости.

Octagon 200CL разработан для работы с SieveWare - новым программным обеспечением для легкой оценки и документирования процесса отсева.

ПРЕИМУЩЕСТВА ОБОРУДОВАНИЯ

- | Контроль общей амплитуды по "замкнутому циклу" обеспечивает воспроизводимое рассевание
- | Цифровое управление для простой и надежной работы
- | Простая в использовании система зажима сит
- | Вмещает до 8 сит полной высоты диаметром 200 мм (8 дюймов)
- | Подходит для сухого и мокрого отсева
- | Трехмерное просеивающее движение обеспечивает высокую эффективность разделения материала и обеспечивает просеивание без блокировки ячеек сита
- | Полная совместимость с новым программным обеспечением для оценки и управления SieveWare через порт RS232
- | Нет зависимости от напряжения электросети
- | Нет механических движущихся частей
- | Компактный и портативный
- | Легко настраивается на максимальную эффективность
- | Соответствует требованиям AASHTO T 27

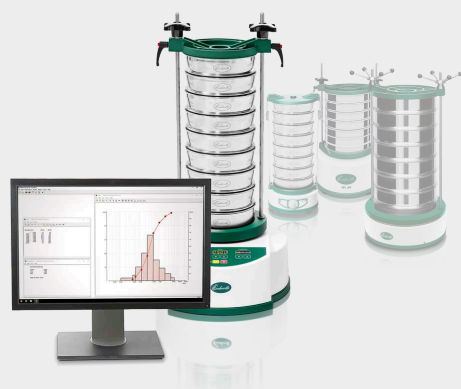

ИДЕАЛЬНОЕ ДОПОЛНЕНИЕ К НАШИМ СИТОВЫМ АНАЛИЗАТОРАМ: SIEVEWARE

Для лучших результатов оценки и более эффективного использования.

- | Автоматическая регистрация, оценка и администрирование данных измерений.
- | Автоматическое определение и настройка общих аналитических весов
- | Комплексный экспорт данных

СИТОВОЙ АНАЛИЗАТОР OSTAGON 200CL

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон	20 мкм - 125 мм
Привод / просеивающее движение	электромагнитный, трёхмерное
Максимальное количество материала	3 кг
Максимальное количество сит	8 полной высоты / 16 половинной высоты (200 мм сита)
Задание амплитуды	0 - 3 мм цифровая настройка с шагом 0,1 мм регулировка амплитуды "замкнутый контур"
Задание скорости	3,000 об/мин при 50 Гц
Дисплей времени	цифровая установка времени 00:10 - 99:50 мин
Работа с интервалами	да (2 режима)
Возможность сухого отсева	да
Возможность мокрого отсева	да
Серийный интерфейс	да (RS-232)
Диаметр сит	100/200 мм 8"
Макс. высота колонны сит	до 450 мм
Зажимное устройство	быстроразъемное зажимное устройство (в комплекте)
Модель	настольная модель

Степень защиты	IP 21
Электропитание	100-240В 50/60Гц
Тип электросети	1 - фазное
Ш x В x Д	418 x 232 x 435 мм
Вес нетто	~35 кг
Стандарты	CE

www.endecotts.ru/octagon200cl

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

ПРОСЕИВАЮЩАЯ МАШИНА OCTAGON 200CL

**для 8 сит полной высоты диаметром 200 мм (8") (заказываются отдельно)
включая быстросъемную зажимную систему**

OCT200CL/100-240

Octagon 200CL, 100-240 B, 50/60 Гц

Сита и аксессуары (приемный сосуд, крышка и др.)

НАБОР ДЛЯ МОКРОГО РАССЕВА

ZMWSK-OCT200	ø 200 мм	for Octagon 200 and Octagon 200 CL
--------------	----------	------------------------------------

ZMWSK-OCT200_8	ø 8"	for Octagon 200 and Octagon 200 CL
----------------	------	------------------------------------