




СИТОВОЙ АНАЛИЗАТОР EFL 300

Новый ситовой анализатор EFL 300 сочетает в себе лучшие характеристики EFL2 и современные технологии рассева. EFL 300 остается чрезвычайно прочным, но в то же время легким и более мощным, чем его предшественник EFL2 - теперь можно просеивать более тяжелые и большие образцы. EFL 300 очень универсален. Настройка амплитуды теперь стандартная. На смену тяжелому электродвигателю пришла электромагнитная система, которая есть во всех современных просеивающих машинах. Его более легкая форма означает, что он может быть установлен на полу или даже на столе, что делает его пригодным как для лабораторных, так и для промышленных помещений. Параметры рассева задаются с пульта дистанционного управления. Его функции логичны и очень просты в использовании.

ПРЕИМУЩЕСТВА ОБОРУДОВАНИЯ

- | Новый электромагнитный привод
- | Регулируемая амплитуда
- | Устанавливается на полу или на столе
- | Подходит для мокрого и сухого рассева
- | Цифровое управление для простой и надежной работы через внешний интерфейс
- | Экономичное решение

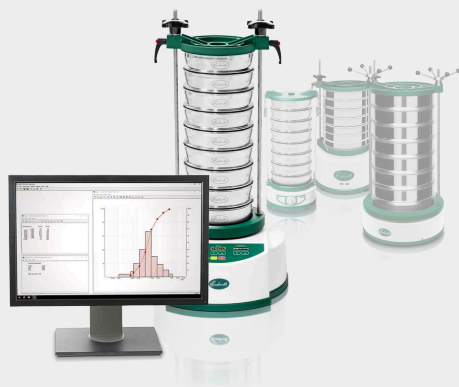

ИДЕАЛЬНОЕ ДОПОЛНЕНИЕ К НАШИМ СИТОВЫМ АНАЛИЗАТОРАМ: SIEVEWARE

Для лучших результатов оценки и более эффективного использования.

- | Автоматическая регистрация, оценка и администрирование данных измерений.
- | Автоматическое определение и настройка общих аналитических весов
- | Комплексный экспорт данных

СИТОВОЙ АНАЛИЗАТОР EFL 300

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон	20 мкм - 40 мм
Привод / просеивающее движение	электромагнитный, трёхмерное
Максимальное количество материала	6 кг
Максимальное количество сит	6 / 12
Максимальная масса комплекта сит	10 кг
Задание амплитуды	0 - 2 мм 10-шаговая, цифровая
Дисплей времени	цифровая, 00:10 - 99:50 мин (внешний блок)
Возможность сухого отсева	да
Возможность мокрого отсева	да
Диаметр сит	100 / 150 / 200 / 250 / 300 / 315 мм 3" / 8" / 12"
Макс. высота колонны сит	450 мм
Зажимное устройство	в комплекте быстросъёмная зажимная система
Модель	напольная или настольная модель
Степень защиты	IP 21
Электропитание	доступны версии для различных сетей электропитания
Тип электросети	1-фазная
Ш x В x Д	427 мм x 240 мм
Вес нетто	~ 45 кг
Стандарты	CE

www.endecotts.ru/efl300

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

ПРОСЕИВАЮЩАЯ МАШИНА EFL 300

**до 6 сит полной высоты диаметром 300 мм (12") (заказываются отдельно),
включая быстросъемную зажимную систему**

EFL300/23050	EFL 300, 230 В, 50 Гц
EFL300/23060	EFL 300, 230 В, 60 Гц
EFL300/10050	EFL 300, 100 В, 50 Гц
EFL300/10060	EFL 300, 100 В, 60 Гц
EFL300/11050	EFL 300, 110 В, 50 Гц
EFL300/11060	EFL 300, 110 В, 60 Гц

Сита и аксессуары (приемный сосуд, крышка и др.)

НАБОР ДЛЯ МОКРОГО РАССЕВА

ZMWSK-EFL300	ø 300 мм	для EFL 300
ZMWSK-EFL300_12	ø 12"	для EFL 300
ZMWSK-EFL300_200	ø 200 мм	для EFL 300
ZMWSK-EFL300_8	ø 8"	для EFL 300